



Hướng dẫn sử dụng

Cân sức khỏe điện tử mặt kính Beurer GS11

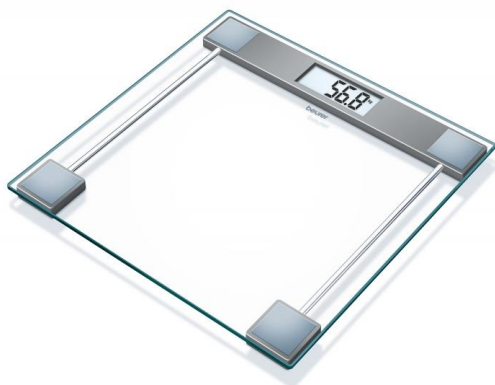


1. Bắt đầu

- Mở nắp đậy ngăn chứa pin ở mặt sau cân.

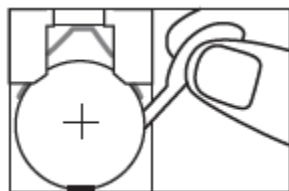

- Lắp 1 pin CR2032 hoặc tháo dải cách pin.


- Đặt cân trên một bề mặt cứng bằng phẳng.

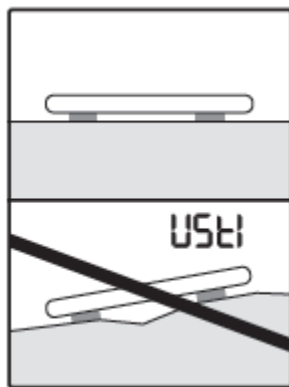

- Cân có thể được chuyển sang các đơn vị đo:
kg → lb → st (nhấn nút **kg/lb/st** ở mặt sau cân)

2. Cân nặng

- Bước lên đứng trực tiếp trên mặt cân (2 chân).

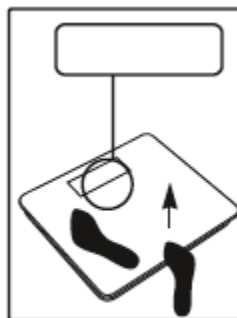


Quickstart

- Chức năng **Quickstart**: cân không cần khởi động nguồn, cân tự động bật khi đứng lên cân và bắt đầu đo.

- Đứng yên trong khi đang cân!

- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau khoảng 2 giây.

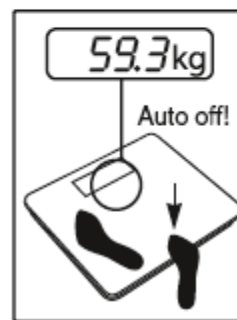

- Cân tự động tắt (khoảng 10 - 12 giây).

- Chờ đợi cân tắt trước khi cân đo thêm lần khác nữa (nên đặt cân nguyên tại vị trí đã cân đo kết quả).


NHÀ NK, PP & BH SẢN PHẨM BEURER - CT CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Miền Bắc: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội - 0243 577 31 51/52/53

Miền Nam: 34/35 Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh


Miền Trung: 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Lưu ý: cho lần sử dụng đầu tiên và di chuyển hoặc nhắc cân khỏi vị trí đã đặt cân.

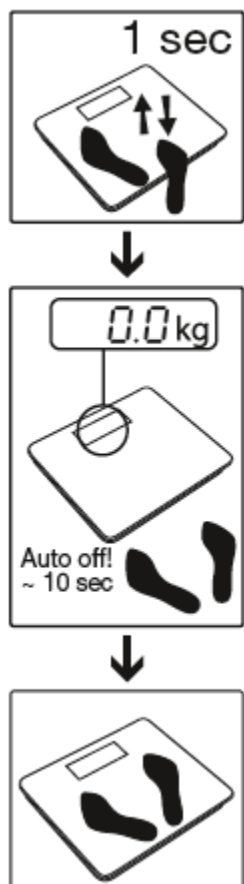


- Bước lên đứng trực tiếp trên cân khoảng 1 giây (0.0 kg xuất hiện) rồi bước xuống.
- Chờ đợi cân tự động tắt khoảng 10 giây.
- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô tả mục 2.

3. Thông báo lỗi

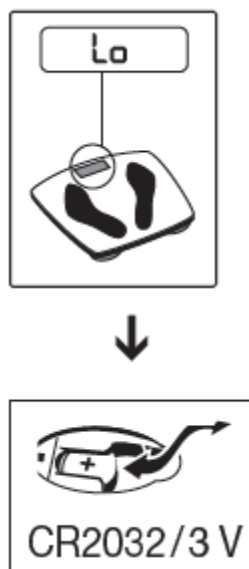

- Thông báo **Lo**: pin đã hết nguồn → thay thế pin (1 pin CR2032)

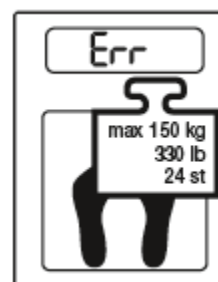

- Thông báo **Err**: quá tải - vượt quá trọng lượng tối đa: 150 kg / 330 lb / 24 st.

4. Thông số

- Mức cân tối đa: 150 kg (330 lb / 24 st)
- Khoảng chia: 100 g (0.2 lb / 0,01 st)
- Màn hình hiển thị LCD lớn
- Kích thước chữ số: 25 mm

NHÀ NK, PP & BH SẢN PHẨM BEURER - CT CP XNK TBYT HỢP PHÁT

Miền Bắc: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội - 0243 577 31 51/52/53

Miền Nam: 34/35 Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh

Miền Trung: 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng