

# GHẾ MASSAGE MC3800



Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ghế Massage MC3800 của hãng Beurer.

## 1. Giới thiệu về sản phẩm

Với sự hỗ trợ của thiết bị Ghế massage điện MC3800 này, bạn đã mang lại cho mình dịch vụ massage hiệu quả và dễ chịu. Việc massage có thể giúp vừa thư giãn và kích thích, và được sử dụng phổ biến để điều trị các cơ bắp cứng hoặc căng thẳng, đau đón và mệt mỏi. Thiết bị này cung cấp các chế độ massage mạnh mẽ và chuyên sâu cho toàn bộ lưng và chân. Do đó, ghế massage cần được đặt đúng vị trí phù hợp trên đệm ghế của bạn để hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân, không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại.

## 2. Hướng dẫn sử dụng an toàn.

### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: [info@thietbiyte-eu.vn](mailto:info@thietbiyte-eu.vn)

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp lưng của người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn.

### Cảnh báo

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng với trường hợp người điều trị có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở)
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai và trên động vật
- Không sử dụng trong khi bạn ngủ
- Không sử dụng trong xe
- Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như thuốc giảm đau, rượu)
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Không được đứng trên thiết bị hoặc đặt những vật dụng khác trên thiết bị.
- Chỉ có một người có thể sử dụng ghế massage tại 1 thời điểm bất kỳ.
- Không để thiết bị chịu tải trọng quá 150 kg.

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước

khi sử dụng các thiết bị massage nếu:

- Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
- Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Bạn đang bị bệnh tiểu đường
- Bạn đang có những cơn đau bụng chưa rõ nguyên nhân.


Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục đích không phù hợp hoặc bất cần.

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.
- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.

### 3. Mô tả sản phẩm Ghế massage

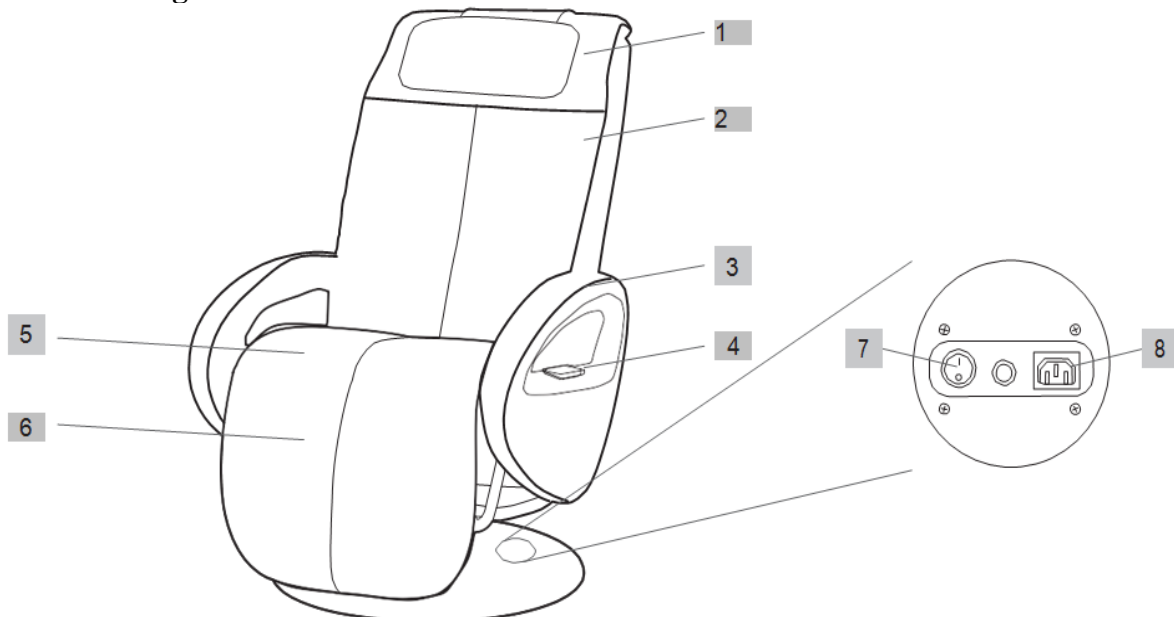

1. Gối tựa	7. Công tắc chính
2. Tựa lưng	8. Ổ cắm điện
3. Tựa tay	

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852


Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: [info@thietbiyte-eu.vn](mailto:info@thietbiyte-eu.vn)

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

4. Điều khiển bằng tay với ngăn chứa pin	9. Con lăn massage
5. Đệm ghế	10. Đệm massage bằng áp suất không khí
6. Tựa chân	

### Điều khiển cầm tay

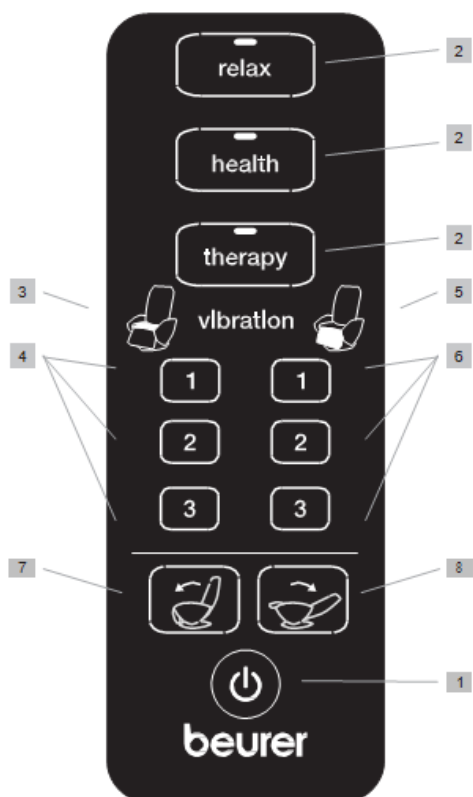

1. Nút On/Off
2. Chương trình massage tự động
3. Massage rung tại phần đệm ngồi
4. Cường độ Massage rung
5. Massage rung tại phần bắp chân
6. Cường độ Massage rung
7. Nâng tựa lưng & Hạ tựa chân
8. Hạ tựa lưng & Nâng tựa chân

- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã mở tất cả các khoá vận chuyển cho ghế massage.
- Tái sử dụng các con ốc của khóa vận chuyển khi vận chuyển cho các thiết bị

### 4. Hướng dẫn sử dụng.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM



**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

trong tương lai. Vận chuyển cho các thiết bị mà không sử dụng khoá vận chuyển có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các thiết bị.

- Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng cách cắm phích cắm vào ổ cắm.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một vị trí thoải mái trước khi dần dần chuyển trọng lượng của bạn lên thiết bị massage.
- Dùng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu.
- Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Hãy ngồi thoải mái và thẳng lưng, đảm bảo rằng bạn ngồi ở vị trí chính giữa ghế. Như vậy, các đầu massage mới có thể di chuyển và massage toàn bộ cột sống của bạn.


#### ❖ Khởi động

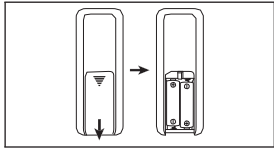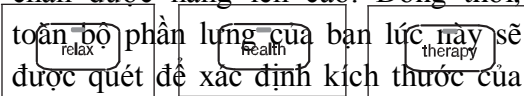- Lắp 2 pin AAA vào ngăn chứa pin của điều khiển cầm tay 
- Bấm nút On/Off trên điều khiển cầm tay. Sau khi bật, lưng ghế massage ở trạng thái hơi ngả ra sau và phần tựa chân được nâng lên cao. Đồng thời, toàn bộ phần lưng của bạn lúc này sẽ được quét để xác định kích thước của người sử dụng. 
- Chương trình massage thư giãn nhẹ nhàng sẽ tự động kích hoạt sau khi thiết bị đã xác định được kích thước lưng của người sử dụng.

- Nhấn nút Cường độ để thiết lập, điều chỉnh cường độ massage rung động tại khu vực lưng và chân hoặc để tắt nó đi.
- Chế độ massage rung có thể được bật hoặc tắt một cách riêng biệt, áp dụng cho khu vực đệm ghế và bàn chân.

#### ❖ Vị trí bằng phẳng / vị trí thẳng đứng

- Đặt ghế massage ở vị trí thẳng bằng
- Phần lưng ghế và phần tựa chân có thể nâng lên hoặc hạ xuống.
- Chức năng này đã sẵn sàng khi một chương trình massage được bật/tắt.
- Không cần thiết phải nhấn nút On/Off để làm điều này, bạn chỉ cần nhấn nút vị trí phù hợp để điều chỉnh:

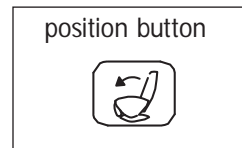

#### ❖ Chương trình massage tự động

- Có ba chương trình massage tự động: **Relax, Health & Therapy** (Thư giãn, Làm mới sinh lực và Trị liệu - massage bằng áp suất không khí).
- Các chương trình này tự động massage toàn bộ lưng của bạn với sự kết hợp nhịp nhàng của các động tác massage lăn, xoa bóp, bấm huyệt...
- Để kích hoạt các chế độ tự động, bạn nhấn nút hiển thị chế độ mà mình mong muốn:

Các chương trình massage sẽ tự động khởi động. Tổng thời gian hoạt động cho từng chương trình là 15 phút. Sau đó, chiếc ghế massage sẽ chuyển sang chế độ chờ.

#### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội


Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

❖ **Chế độ Massage rung động;  
Cường độ rung động.**

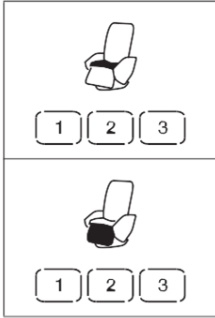


Có ba thiết lập cho chế massage rung trong khu vực đệm ghế ngồi và chân.

- 1 = thấp
- 2 = trung bình
- 3 = cao

- Bạn cũng có thể lựa chọn chế độ massage rung động riêng lẻ với điều kiện nút On/Off phải được kích hoạt và chương trình massage hiện tại phải được ngừng hoạt động.
- Sau khi sử dụng, ngắt kết nối bằng cách rút bộ cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Không ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trong quá trình hoạt động.

❖ **Cài đặt bổ sung**

*Cơ chế gấp ghế massage*

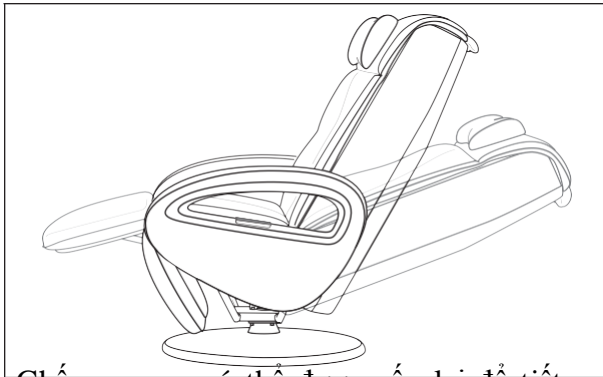

Ghế massage có thể được gấp lại để tiết kiệm không gian khi lưu trữ.

- Nhấn nút On/Off để tắt thiết bị. Ghế massage sẽ trở lại vị trí ban đầu.
- Khi ghế đã trở về vị trí bắt đầu, tắt toàn bộ thiết bị.

**6. Sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục**

- Mở đệm ghế về phía trước.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Nhả cơ chế khóa ở mặt sau của phần tựa lưng (phía dưới).
- Cẩn thận đẩy phần tựa lưng về phía đệm ghế.
- Nếu cần thiết, đặt phần đệm phần tựa lưng ra phía sau lưng ghế trước khi gấp lại

**5. Bảo quản và lưu trữ.**

- Luôn ngắt kết nối với thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phương pháp được quy định để làm sạch thiết bị. Không được để bất cứ chất lỏng nào xâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm, và một số chất tẩy rửa nhẹ khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào mang tính ăn mòn cao.
- Lớp bảo vệ ghế có thể được giặt máy ở nhiệt độ 40°C
- Ngưng sử dụng thiết bị này cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Nếu bạn sử dụng các ốc vít hoặc khóa an toàn cho việc vận chuyển thiết bị, cần chắc chắn rằng chúng được lấy ra trước khi sử dụng thiết bị.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
--------	-------------	----------------

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

Thiết bị phát ra âm thanh lớn khi hoạt động	Những tiếng động là bình thường và có nguồn gốc từ hoạt động của động cơ hoặc từ các con lăn massage cọ xát với các tấm đệm.	Không cần có hành động khắc phục
Đầu massage không chuyên động	Thiết bị không được kết nối với nguồn điện.	Cấm phích cắm vào ổ điện
	Chưa bật công tắc chính (phía sau ghế)	Bật công tắc chính (phía sau ghế)
	Các kết nối với nguồn điện đã bị gián đoạn.	Vui lòng liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Phần tựa lưng/phần tựa chân không thể nâng lên/ hạ xuống.	Phần tựa Lưng/ phần tựa chân bị quá tải hoặc bị khóa.	Gỡ bỏ những vật cản gây ảnh hưởng tới thiết bị
Đầu massage ngưng chuyển động khi đang sử dụng	Cơ chế tự ngắt do thiết bị quá nóng đã được kích hoạt	Hãy để thiết bị hạ nhiệt trong ít nhất 30 phút trước khi sử dụng lại
	Thiết bị đã hoạt động quá thời gian cho phép	
Điều khiển cầm tay không hoạt động	Điều khiển cầm tay không được kết nối với ghế massage	Để cài đặt Điều khiển cầm tay, chỉ nó hướng tới nửa dưới của phần tựa lưng. Không nên đứng xa thiết bị quá 40cm. Nhấn nút On / Off trên Điều khiển cầm tay cho đến khi đèn LED trên chương trình thư giãn massage sáng lên. Sau khoảng 3-4 giây, đèn LED 4 bắt đầu nhấp nháy rồi tắt. Việc cài đặt Điều khiển cầm tay đã sẵn sàng để sử dụng.

## 7. Thông số kỹ thuật.

Sản phẩm	MC3800
➤ Nguồn điện áp / tần suất	➤ 220-240 V ~ 50/60 Hz
➤ Tiêu hao năng lượng	➤ 200 W
➤ Kích thước	➤ 162 x 73 x 76 cm
➤ Trọng lượng	➤ Net 50.5 kg (Đã đóng gói: 60.4 kg)
➤ Khả năng chịu tải tối đa	➤ 150 kg

### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>