




MÁY MASSAGE CẦM TAY MG16

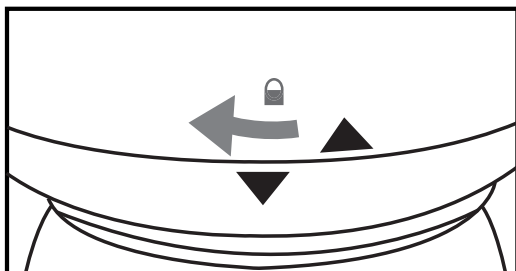

Hướng dẫn sử dụng lần đầu: vặn nắp khoang pin. Lắp 3 pin AAA theo cực đánh dấu. Lắp lại nắp ngăn khoang pin.

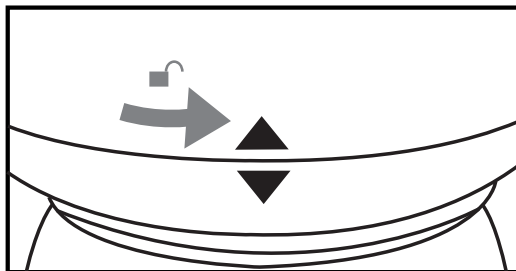

Vận hành: bằng nút nguồn (ấn 1 lần để bật, 2 lần để tắt)

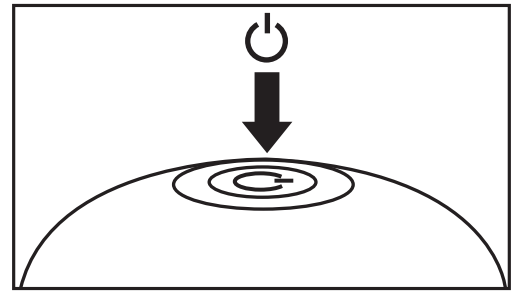

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra do sử dụng bất cẩn hay sử dụng không đúng
- Thiết bị này được thiết kế giúp xoa bóp các bộ phận riêng lẻ của cơ thể con người. KHÔNG sử dụng thiết bị trên động vật, trẻ em, trên các vết thương (như bỏng, vết thương hở, sẹo), cho phụ nữ mang thai, sau khi phẫu thuật hoặc trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể (ví dụ: đầu, khớp). Nếu đang sử dụng máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ghép, các thiết bị hỗ trợ khác hoặc nếu bạn không chắc thiết bị phù hợp với mình hay không, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý
- Chỉ vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Không ngâm thiết bị trong nước!
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết chỉ có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị
- Thải bỏ pin đã hết và thiết bị khi không sử dụng được nữa tại các điểm thu rác phù hợp. Không thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM

CN Miền Trung : Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline : 19006852

Web : beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn