

GHẾ MASSAGE MG295



Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ghế Massage MG295 của hãng Beurer. Các thiết bị đi kèm sản phẩm gồm:

- Ghế massage
- Bộ cung cấp điện
- Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành

1. Giới thiệu về sản phẩm

Với sự hỗ trợ của thiết bị Ghế massage điện MG295 này, bạn đã mang lại cho mình dịch vụ massage hiệu quả và dễ chịu. Việc massage có thể giúp vừa thư giãn và kích thích, và được sử dụng phổ biến để điều trị các cơ bắp cứng hoặc căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thiết bị này cung cấp các chế độ massage mạnh mẽ và chuyên sâu cho toàn bộ lưng. Do đó, ghế massage cần được đặt đúng vị trí phù hợp trên đệm ghế của bạn để hoạt động một cách hiệu quả nhất.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân, không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại.

2. Hướng dẫn sử dụng an toàn.

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp cổ và lưng của người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn.

Cảnh báo

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng với trường hợp người điều trị có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở)
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kỳ mang thai và trên động vật
- Không sử dụng trong khi bạn ngủ
- Không sử dụng trong xe
- Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như thuốc giảm đau, rượu)
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để

đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:

- Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
- Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Bạn đang bị bệnh tiểu đường
- Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục đích không phù hợp hoặc bất cần.

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.
- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng

Điều khiển cầm tay

của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.

- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.

3. Mô tả sản phẩm

Ghế massage



1. Hai đầu massage (cổ)	6. Điều khiển cầm tay
2. Bốn đầu massage (lưng)	7. Lớp bảo vệ (Có thể tháo rời)
3. Đai cố định ghế	8. Móc khóa kéo (phía sau, dùng để tháo lớp bảo vệ)
4. Dây cáp nguồn	9. Nệm sồi
5. Túi bảo quản	

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

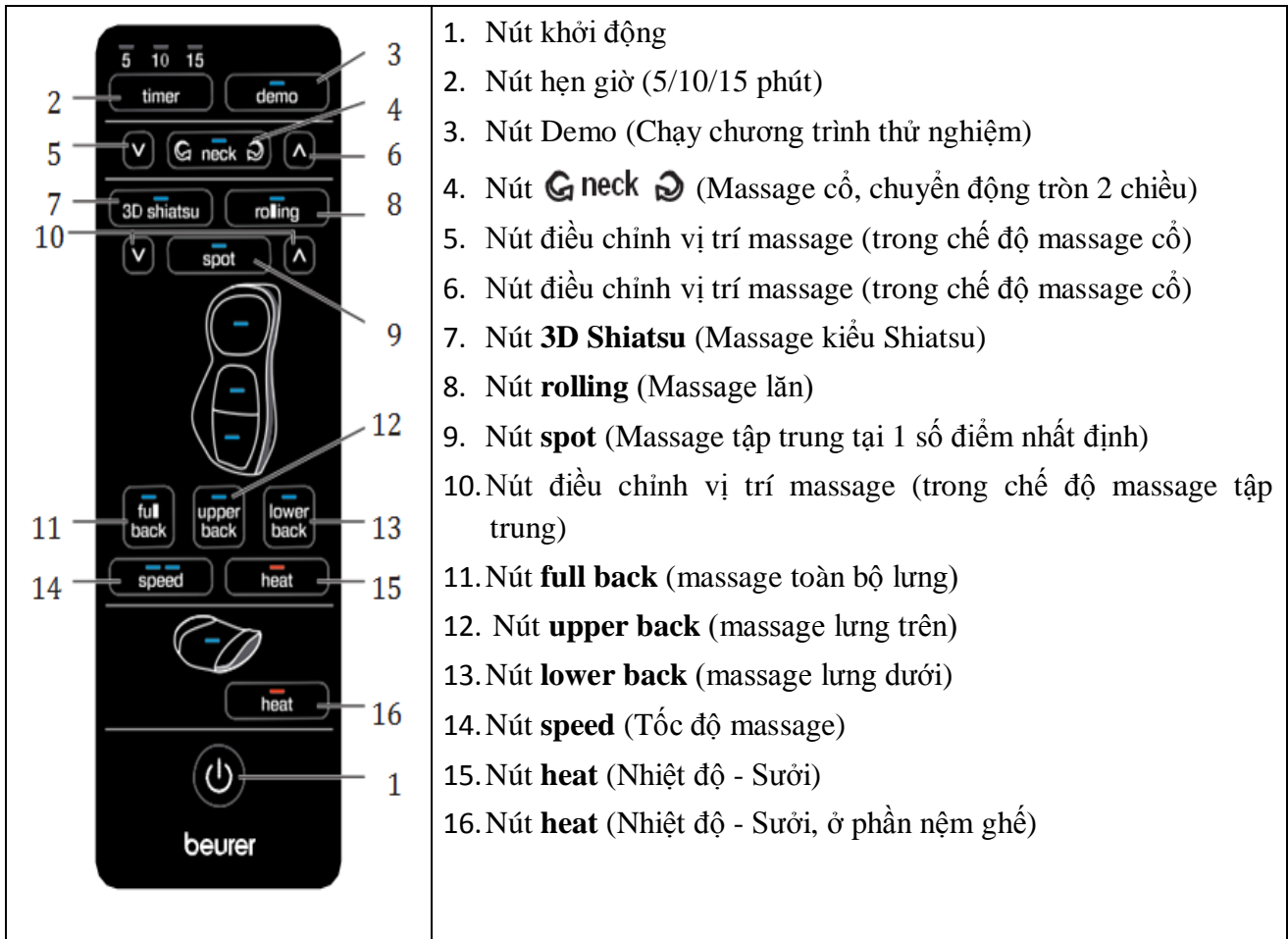
Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>



1. Nút khởi động
2. Nút hẹn giờ (5/10/15 phút)
3. Nút Demo (Chạy chương trình thử nghiệm)
4. Nút **neck** (Massage cổ, chuyển động tròn 2 chiều)
5. Nút điều chỉnh vị trí massage (trong chế độ massage cổ)
6. Nút điều chỉnh vị trí massage (trong chế độ massage cổ)
7. Nút **3D Shiatsu** (Massage kiểu Shiatsu)
8. Nút **rolling** (Massage lăn)
9. Nút **spot** (Massage tập trung tại 1 số điểm nhất định)
10. Nút điều chỉnh vị trí massage (trong chế độ massage tập trung)
11. Nút **full back** (massage toàn bộ lưng)
12. Nút **upper back** (massage lưng trên)
13. Nút **lower back** (massage lưng dưới)
14. Nút **speed** (Tốc độ massage)
15. Nút **heat** (Nhiệt độ - Sưởi)
16. Nút **heat** (Nhiệt độ - Sưởi, ở phần nệm ghế)

4. Hướng dẫn sử dụng.

- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã mở tất cả các khoá vận chuyển cho ghế massage.
- Để làm điều này, gỡ bỏ ốc vít bằng công cụ được cung cấp phía sau của bọc ghế. Nếu các con ốc của khóa vận chuyển không được gỡ bỏ đầu tiên và lớp bảo vệ ghế Shiatsu được sử dụng ngay lập tức, thiết bị sẽ hư hỏng và không sử dụng hay không thể sửa chữa được. Việc bảo hành sẽ không áp dụng trong trường hợp này.
- Tái sử dụng các con ốc của khóa vận

chuyển khi vận chuyển cho các thiết bị trong tương lai. Vận chuyển cho các thiết bị mà không sử dụng khoá vận chuyển có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các thiết bị.

- Đặt ghế massage thẳng đứng trên một chiếc ghế phù hợp với một khu vực ngồi và tựa lưng (ghế, sofa hoặc vị trí tương tự). Hãy chắc chắn rằng lưng ghế (lớp bảo vệ ghế) đủ cao.
- Sử dụng các đai cố định và dải Velcro linh hoạt để đảm bảo chỗ ngồi thật vững chắc.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng cách cắm phích cắm vào ổ cắm.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM



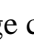


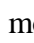
Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

vị trí thoải mái trước khi dần dần chuyển trọng lượng của bạn lên thiết bị massage.

- Dừng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu.
- Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Hãy ngồi thoải mái và thẳng lưng, đảm bảo rằng bạn ngồi ở vị trí chính giữa ghế. Như vậy, các đầu massage mới có thể di chuyển và massage toàn bộ cột sống của bạn.

❖ Chế độ neck - Massage cổ

- Nhấn nút  neck  để bắt đầu Chế độ massage cổ. Nhấn nút  neck  một lần nữa để thay đổi hướng massage. Nhấn nút  neck  một lần nữa để tắt Chế độ massage cổ.

❖ Chế độ 3D Shiatsu – Massage lưng

- Nhấn nút **3D Shiatsu**. Chọn khu vực bạn muốn massage với các nút **full back/ upper back/ lower back**.
- Các đầu massage Shiatsu từ từ di chuyển từ vị trí thấp nhất của lưng và di chuyển lên và xuống tại khu vực cần massage. Sự chuyển động quay và chuyển động lên xuống được kết hợp nhịp nhàng, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.

❖ Chế độ spot - Massage tập trung

- Bạn có thể chọn chế độ **spot** - Massage tập trung, (cũng là Chế độ massage 3D Shiatsu nhưng không có chuyển động thẳng đứng) bằng cách nhấn nút **spot**.
- Bạn có thể thay đổi vị trí của các điểm cần massage tập trung bằng cách giữ một trong hai mũi tên bên cạnh nút **spot** cho đến vị trí mong muốn.

❖ Cường độ massage

- Khi sử dụng chế độ **3D Shiatsu**, hai tốc độ massage khác nhau đã được lập trình sẵn, có thể được lựa chọn bằng cách sử dụng nút **speed** tốc độ. Nếu các đầu massage lăn đã hoạt động, đầu tiên, bạn nhấn nút **3D Shiatsu** để chuyển sang chế độ **3D Shiatsu** và sau đó thiết lập tốc độ massage bạn mong muốn.

❖ Chế độ rolling - Massage lăn

- Nhấn nút **rolling**. Chọn khu vực bạn muốn massage với các nút **full back/ upper back/ lower back**.
- Khi Chế độ massage (**3D Shiatsu** hoặc **rolling**) được thay đổi, những khu vực được chọn trước đó (**full back/ upper back/ lower back**) được lưu lại.
Lưu ý: Khu vực massage phải được lựa chọn một lần nữa khi chuyển đổi từ Chế độ **spot** massage sang Chế độ **rolling**.

❖ Chức năng heat - Sưởi

- Nhấn nút **heat** [15] để bật chức năng sưởi của các đầu massage. Các đèn

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh:Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website:<http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

chiếu sáng tại đầu massage thay đổi từ màu xanh thành màu đỏ.

- Thiết bị này có chức năng nhiệt ở ghế ngồi. Chức năng này có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng nút **heat** [16].

❖ Chức năng vibration - massage rung động.

- Nhấn nút **vibration** để kích hoạt chế độ massage rung động tại ghế ngồi ở mức thiết lập thấp nhất. Chế độ massage rung động cung cấp tổng cộng 3 chương trình có thể được lựa chọn bằng cách nhấn nút **vibration** một lần nữa. Sau khi nhấn nút **vibration** lần thứ tư, chế độ massage rung động sẽ ngừng hoạt động.
- Thiết bị này có chức năng tắt máy tự động, được thiết lập với thời gian hoạt động tối đa 15 phút. Bạn cũng có thể lựa chọn chế độ tự động tắt cho thiết bị (5/10/15 phút). Việc thay đổi lập trình của bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu lại quá trình tính thời gian nghỉ.
- Để tránh cho thiết bị quá nóng khi sử dụng, không thiết lập lại chế độ hẹn giờ khi đang sử dụng thiết bị.
- Thiết bị cũng sẽ tự ngắt khi thiết bị quá nóng. Trong trường hợp này, hãy để thiết bị nguội bớt trong khoảng 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Có thể ngừng quá trình massage bằng cách nhấn nút khởi động 1 lần nữa. Lưu ý: khi tắt thiết bị, các đầu massage sẽ chuyển động về vị trí ban

đầu ở vùng thắt lưng. Chỉ khi các đầu massage đạt tới vị trí này, thiết bị mới được tắt hoàn toàn.

- Nếu thiết bị được ngừng sử dụng ở chế độ Shiatsu, nó sẽ trở về vị trí bắt đầu và chuyển mạch tự tắt.
- Không ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trong quá trình hoạt động.

5. Bảo quản và lưu trữ

- Luôn ngắt kết nối với thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phương pháp được quy định để làm sạch thiết bị. Không được để bất cứ chất lỏng nào xâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm, và một số chất tẩy rửa nhẹ khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào mang tính ăn mòn cao.
- Lớp bảo vệ ghế có thể được giặt máy ở nhiệt độ 40°C
- Ngưng sử dụng thiết bị này cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Nếu bạn sử dụng các ốc vít hoặc khóa an toàn cho việc vận chuyển thiết bị, cần chắc chắn rằng chúng được lấy ra trước khi sử dụng thiết bị.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

6. Sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đầu massage quay với tốc độ chậm	Tải trọng trên đầu massage là quá lớn.	Nhà đầu massage.
Đầu massage chỉ chuyển động tại 1 vùng nhất định	Bạn đã chọn chế độ massage tại 1 vùng nhất định	Nhấn các nút full back/upper back/lower back để chuyển hoặc mở rộng vùng được massage.
Đầu massage không chuyển động	Thiết bị không kết nối với nguồn điện.	Kết nối thiết bị với nguồn điện và bật lại máy.
	Thiết bị chưa được bật lên	Nhấn nút khởi động để bật thiết bị và chọn chế độ massage.
	Chưa tháo bỏ khóa an toàn. Cơ chế massage bị hỏng.	Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
	Thiết bị tự ngắt do quá nóng, thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc.	Liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh:Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: info@thietbiyte-eu.vn

Website:<http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>