


MÁY MÁT XA CẦM TAY MG100

Máy mát xa cầm tay MG100 là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình hàng đầu của Beurer. Với tính năng độc đáo, kiểu dáng hiện đại, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, MG100 đã thực sự làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất của thị trường Châu Âu và Quốc tế về chất lượng như CE, ISO...

Với các đầu mát xa công suất lớn, cùng tác dụng tích cực của đèn hồng ngoại, làm giảm căng thẳng và đau nhức, giúp bạn hoàn toàn thư giãn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa tác dụng của máy, cầm đọc kỹ và làm đúng theo những chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

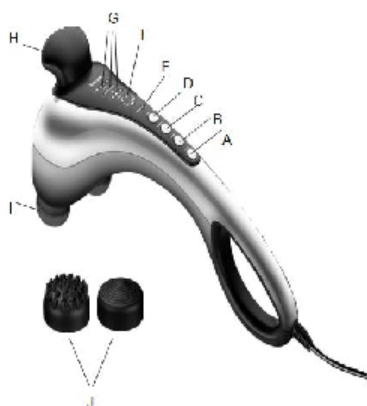

- A. Nút ON/OFF
- B. Nút Tốc độ: Điều chỉnh tốc độ massage
- C. Chương Trình: Lựa chọn các chương trình massage khác nhau
- D. Nút Nhiệt: Sưởi hồng ngoại
- E. Nút Khởi động: Bắt đầu chương trình
- F. Hiển thị tốc độ massage
- G. Chương trình massage
- H. Tay cầm phụ
- I. Đầu massage mặt với hệ thống sưởi hồng ngoại
- J. Đầu massage đỉnh kèm massage (có thể thay thế)

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đảm bảo rằng thiết bị đã được tắt trước khi cắm điện. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút ON/OFF. Chương trình bắt đầu khởi động.
- Nhấn nút "Speed" để tăng / giảm tốc độ massage.
- Nhấn nút "Programs" để lựa chọn giữa 3 chương trình massage khác nhau (với tốc độ cài đặt tự động)
- Chế độ sưởi hồng ngoại có thể được bật trong bất kỳ chương trình massage nào, bằng cách sử dụng nút "Heat".
- Sử dụng thiết bị bằng cả hai tay và đưa vào vùng cần mát xa trên cơ thể. Bạn có thể đứng, ngồi hay nằm, có thể massage cho bản thân hoặc người khác.
- Cường độ massage có thể được thay đổi bằng cách thay đổi lực ấn của tay lên thiết bị.
- Không nên xoa bóp một vùng cơ thể nhất định quá 3 phút.
- Sau khi sử dụng tối đa là 15 phút, rút phích cắm của thiết bị và để nguội. Giữ thiết bị ở nơi khô ráo.

Lưu ý:

- Không sử dụng các thiết bị massage trước khi đi ngủ.
- Thiết bị này có một cơ chế ngắt tự động sau thời gian hoạt động tối đa là 15 phút.

3. HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì lý an toàn, thiết bị phải chỉ được vận hành như sau:

- Chỉ với điện áp quy định trên thiết bị
- Không sử dụng thiết bị nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hại nào trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi có bão.
- Chỉ sử dụng ở nơi khô thoáng, với 2 bàn tay khô.