


## Thiết bị cảm biến theo dõi giấc ngủ Beurer SE80



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer SE80 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.


### 1. Mô tả thiết bị:

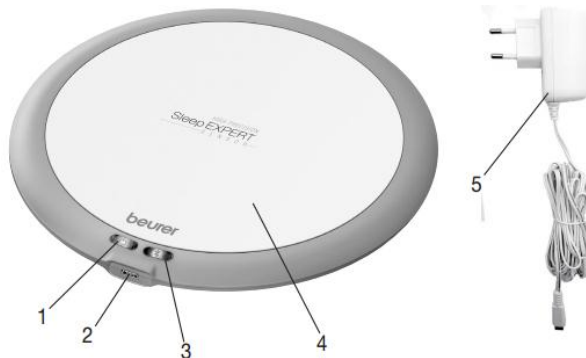

1. Đèn chức năng (màu xanh lá cây)
2. Cổng kết nối với nguồn điện
3. Đèn chức năng Bluetooth (màu xanh dương)
4. Tấm cảm biến
5. Sạc thiết bị

### 2. Hướng dẫn sử dụng:

Để thiết lập máy cảm biến giấc ngủ, tiến hành như sau:

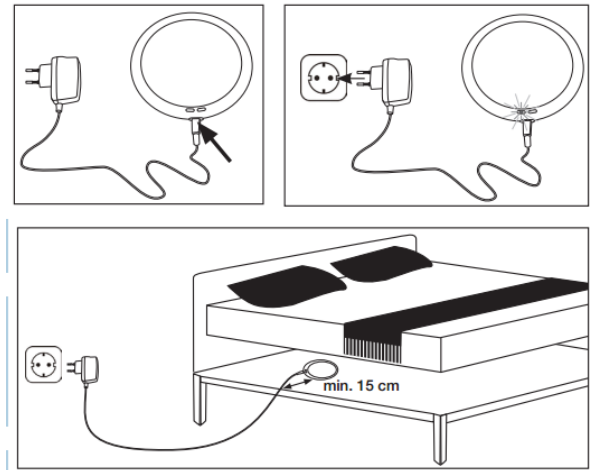

1. Đảm bảo rằng smartphone của bạn được kết nối với Internet.
2. Tải về ứng dụng “beurer Sleep Expert” trong Apple App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android). Máy cảm biến giấc ngủ chỉ có thể được vận hành kết hợp với ứng dụng “beurer Sleep Expert”.

Ghi chú: Tùy thuộc vào các cài đặt cho điện thoại thông minh của bạn, chi phí bổ sung có thể được phát sinh cho việc kết nối với Internet hoặc chuyển dữ liệu.

3. Kích hoạt Bluetooth trên smartphone của bạn.
4. Mở ứng dụng “beurer Sleep Expert” và đăng ký cho mình (bạn chỉ cần làm điều này một lần).

5. Sau khi đăng ký xong, các hướng dẫn cho việc thiết lập các SE 80 được đưa ra trong ứng dụng. Các hướng dẫn sẽ giải thích các hiển thị và chức năng trong ứng dụng và làm thế nào để bắt đầu ghi giấc ngủ của bạn.

Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước một trong các ứng dụng:

6. Kết nối nguồn điện với máy cảm biến giấc ngủ.

7. Cắm sạc vào một ổ cắm phù hợp. Một ánh sáng chức năng màu xanh lá cây trên máy cảm biến giấc ngủ bắt đầu sáng lên.

8. Đặt cảm biến giấc ngủ dưới nệm của bạn ở vị trí vai. Nên có một khoảng cách ít nhất là 15 cm, giữa các cảm biến giấc ngủ và mép giường. Đảm bảo rằng "beurer" logo trên cảm biến giấc ngủ đang hướng lên trên. Sắp xếp các dây cáp của phích cắm điện để không ai sẽ đi qua nó.

**Thông kê giấc ngủ khác nhau được ghi nhận cho tất cả các ghi chép giấc ngủ.**

**Các ứng dụng cho thấy:**

- Thời gian thực tế của giấc ngủ của bạn,
- Bạn đã ngủ bao lâu trong mỗi giai đoạn giấc ngủ (ngủ không sâu, giấc ngủ sâu, giấc ngủ REM, tỉnh táo),
- Chỉ số nhịp thở/nhịp tim của bạn,
- Thời gian bạn ngủ, bao nhiêu lần bạn thức dậy và thức trong bao lâu, và tổng số thời gian nằm trên giường,
- Lời khuyên cá nhân phù hợp với giấc ngủ của bạn,
- "Sleep score": Để tạo ra điều này, các ứng dụng sử dụng các giá trị được ghi nhận để tính chỉ số (0 đến 100), trong đó thông báo cho bạn về chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi đêm. "Sleep score" càng cao thì bạn càng có giấc ngủ tốt.

### **3. Bảo quản và lưu trữ:**

- Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi, hóa chất, thay đổi mạnh mẽ về nhiệt độ, điện từ trường và nguồn phát nhiệt (lò sưởi, máy sưởi).
- Làm sạch các thiết bị với một miếng vải mềm và khô. Không sử dụng sản phẩm làm sạch mài mòn.
- Lưu trữ các thiết bị ở nơi khô sạch, bảo vệ khỏi bụi và ở nhiệt độ 5-40 ° C.



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline: 19006852

Web : [www.beurer.vn](http://www.beurer.vn) / [thietbiyte-eu.vn](http://thietbiyte-eu.vn)