

beurer

MÁY HÚT SỮA BEURER BY60



1. Giới thiệu thiết bị


Máy hút sữa Beurer BY 60 giúp các bà mẹ đang trong giai đoạn cho con bú vắt sữa một cách dễ dàng và thuận tiện, tránh tình trạng tích tụ sữa gây đau đớn và thậm chí là viêm núm ngực. Ngoài ra, máy cũng giúp làm giảm nứt hoặc đau núm ngực. Người dùng có thể sử dụng chức năng kích thích được tích hợp để hút sạch sữa và chuyển giữa các núm ngực, từ đó, giúp việc hút sữa mẹ trở nên dễ dàng hơn. Máy cũng hỗ trợ bạn lưu trữ sữa mẹ trong bình, rất tiện lợi khi đi du lịch hoặc nếu mẹ phải xa em bé trong một thời gian dài và cả trong các trường hợp bé không thể bú trực tiếp vì lý do sức khỏe (do sinh non hoặc hở vòm miệng).

Mô tả thiết bị



1. Thân máy với màn hình
2. Đầu hút với nắp, màng và van silicon
3. Ống silicon
4. Bình sữa (180ml)
5. Nắp núm vú
6. Núm vú
7. Nắp vận cho bình
8. Nắp Avent
9. Nắp NUK
10. Màng silicon
11. Van silicon
12. Phễu silicon (kích thước chuẩn và nhỏ)
13. Bơm tay 2 cấp độ
14. Túi xách
15. Đế giữ bình

Màn hình hiển thị

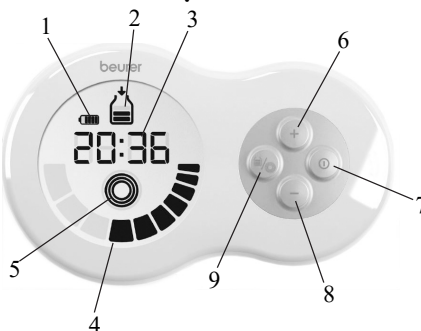

1. Nút + (tăng cường độ kích thích hoặc hút sữa)
2. Nút - (giảm cường độ kích thích hoặc hút sữa)
3. Nút Chế độ (chuyển giữa chế độ hút sữa và kích thích)
4. Tình trạng pin (khi hoạt động không phích cắm)
5. Chế độ hút sữa
6. Hiển thị thời gian (hẹn giờ kích thích/thời gian hút sữa)
7. Cường độ kích thích hoặc hút
8. Chế độ kích thích núm ngực - không hút sữa
9. Nút Nguồn

2. Lưu ý và cảnh báo

- Chỉ sử dụng thiết bị để hút sữa cho các bà mẹ đang trong giai đoạn

cho con bú, không sử dụng cho động vật.

- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ.
- Chỉ sử dụng thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm cho người dùng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra trong trường hợp này.
- Giữ thiết bị và phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Chỉ sử dụng thiết bị với phụ kiện chính hãng và với thông số nguồn điện được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
- Không kéo, bẻ hay uốn cong dây điện.
- Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi thiết bị có lỗi, trước khi vệ sinh và khi không sử dụng thiết bị.
- Không để thiết bị tiếp xúc với bề mặt nóng hoặc vật nhọn.
- Đề đảm bảo vệ sinh, chỉ sử dụng bộ phụ kiện hút sữa cho một người.
- Không sử dụng thiết bị nếu cảm thấy buồn ngủ hoặc trong bồn tắm.
- Chỉ được sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Tuyệt đối không được tự mở hoặc sửa chữa thiết bị.
- Không ngâm thân máy vào trong nước và không chạm vào thân máy bằng tay ướt.
- Khi sử dụng, hãy đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng và cố định.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát trẻ để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.
- Bảo vệ thiết bị và phụ kiện khỏi các tác động mạnh, ẩm ướt, bụi bẩn, biến đổi nhiệt độ lớn và ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.
- Không sử dụng thiết bị ở nơi có trường điện từ mạnh để tránh nhiễu điện từ, ảnh hưởng xấu đến chức năng của thiết bị.
- Không kéo ống hút silicon.
- Chỉ sử dụng núm vú để cho trẻ bú, không dùng như ty giả.
- Kiểm tra thiết bị trước mỗi lần sử dụng và kéo giãn núm vú theo các hướng.
- Đề đảm bảo vệ sinh, trước khi sử dụng lần đầu, đặt các bộ phận tiếp xúc với sữa vào nước sôi trong 5 phút. Vệ sinh các bộ phận trước mỗi lần sử dụng.
- Thải bỏ núm vú khi có dấu hiệu hư hỏng hay mòn.
- Không để núm vú tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt và không để núm vú trong dung dịch khử trùng quá thời gian quy định để tránh làm hỏng núm vú.
- Giữ núm vú xa các chất ngọt để tránh làm sâu răng trẻ.
- Đảm bảo sữa bên trong bình không vượt quá 50°C.
- Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa sạch các vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
- Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị ngạt thở! Giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Chú ý lắp pin đúng đầu cực.
- Nếu pin bị chảy nước, hãy đeo gang tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.
- Đảm bảo không để pin quá nóng.
- Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào trong lửa.
- Không sạc, làm đoản mạch pin, tháo, tách rời hay nghiền pin.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang chứa.
- Không sử dụng pin sạc. Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương.


3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

Lắp ghép thiết bị



1. Vận đầu hút vào bình thật chắc chắn để sữa không bị chảy ra ngoài
2. Lắp ống silicon vào đầu hút và thiết bị
3. Kết nối thiết bị với dây điện và cắm phích cắm vào ổ điện.

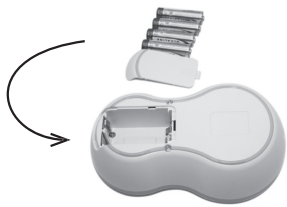

- Nếu sử dụng thiết bị bằng pin, hãy mở nắp khoang pin ở phía sau của thân máy. Lắp bốn pin AA (đi kèm với thiết bị) đúng đầu cực. Đóng lại nắp khoang pin. 4 pin AA mới sẽ giúp thiết bị hoạt động trong khoảng 60 phút (với cường độ thấp nhất).

Vệ sinh và tiệt trùng

⚠ CẢNH BÁO

Vệ sinh và tiệt trùng từng phụ kiện tiếp xúc trực tiếp với sữa mẹ của thiết bị (ngoại trừ thân máy và ống silicone) trước khi sử dụng lần đầu và trước mỗi lần sử dụng. Để tiệt trùng, thực hiện như sau:

- Tháo đầu hút khỏi bình.
- Tháo ống silicone ra khỏi đầu hút và thân máy.
- Tháo màng silicone và van silicone khỏi đầu hút.
- Tiệt trùng bình và đầu hút (với màng và van silicone) trong năm phút bằng cách đặt vào nước sôi hoặc sử dụng máy khử trùng hơi nước. Không sử dụng cho đến khi tất cả các bộ phận khô hoàn toàn. Không sử dụng sản phẩm làm sạch kháng khuẩn để tránh làm hỏng nhựa trên thiết bị.
- Lau sạch thân máy cẩn thận bằng vải hơi ẩm. Không sử dụng chất hoặc dung dịch tẩy rửa.

3.2 Vận hành thiết bị


Mẹo nhỏ giúp cải thiện tuyến sữa

- Ấm áp và thư giãn sẽ kích thích tuyến sữa. Hãy sử dụng thiết bị sau khi tắm hoặc khi đang thư giãn.
- Nếu ngực của bạn bị sưng hoặc đau, đặt một chiếc khăn ẩm lên ngực trong vài phút sẽ giúp cải thiện tuyến sữa.
- Nếu đang cho con bú, hãy sử dụng thiết bị đồng thời bên bầu ngực còn lại.
- Nếu không hút được sữa ngay sau khi sử dụng thiết bị, hãy cố gắng thư giãn và thử lại sau một vài phút.
- Nếu bạn cảm thấy đau nhói khi sử dụng thiết bị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bắt đầu sử dụng




- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy rửa tay và ngực thật kỹ.
- Ngồi với phần thân trên hơi nghiêng về phía trước. Bạn có thể chèn gối vào sau lưng.

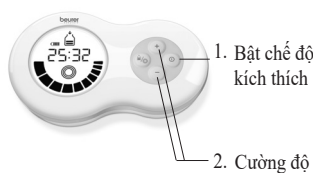

- Đặt tấm chắn ngực với phễu silicone nhẹ nhàng lên ngực. Đảm bảo núm ngực được bao kín hoàn toàn và không có khí thừa. Để đảm bảo chức năng hoàn hảo của thiết bị, tấm chắn ngực phải được kéo chặt vào ngực.
- Để bật thiết bị, nhấn nút Nguồn. Thiết bị sẽ tự động bắt đầu ở chế độ kích thích (●) và bộ hẹn giờ hai phút sẽ hiển thị trên màn hình. Trong hai phút này, núm ngực của bạn sẽ được kích thích để chuẩn bị hút sữa. Sử dụng các nút +/- để đặt cường độ kích thích bạn muốn.

- Sau hai phút, biểu tượng (●) sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình. Để bắt đầu hút sữa, nhấn nút Chế độ. Sử dụng các nút +/- để chọn cường độ hút phù hợp với bạn. Khi đã đủ 180 ml sữa trong bình, hãy dừng hút.

- Nếu bạn muốn chuyển về chế độ kích thích, nhấn nút Chế độ. Thiết bị sẽ bắt đầu kích thích trong 2 phút.

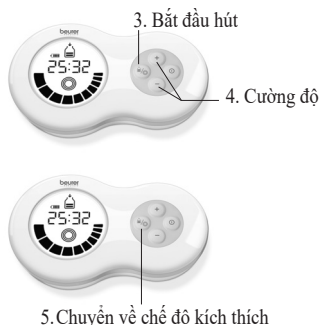


- Thiết bị sẽ hoạt động với mức cường độ được điều chỉnh từ lần sử dụng gần nhất.

- Nhấn nút Nguồn để tắt thiết bị.

Sử dụng bơm tay

- Tháo nắp ở đầu hút và lắp bơm tay có màng silicone bằng cách ấn mạnh màng silicone vào đầu hút.

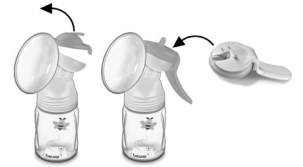

- Đặt tấm chắn ngực với phễu silicone nhẹ nhàng lên ngực. Đảm bảo núm ngực được bao kín hoàn toàn và không có khí thừa. Để đảm bảo chức năng hoàn hảo của thiết bị, tấm chắn ngực phải được kéo chặt vào ngực. Sử dụng bơm tay như hình.



- Bạn có thể thay đổi cường độ hút bằng cách chọn MIN / MAX (thấp/cao) trên nắp.



Bảo quản sữa

Bạn có thể trữ sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông trong một khoảng thời gian nhất định.

- Khi lưu trữ sữa, đảm bảo bình chứa được tiệt trùng trước khi sử dụng.
- Lưu trữ sữa trong tủ lạnh hoặc tủ đông ngay sau khi hút. Không bảo quản sữa tại nhiệt độ phòng.
- Nếu lưu trữ sữa trong tủ đông, bạn nên đánh dấu ngày hút vào bình.

	NHIỆT ĐỘ PHÒNG	TỦ LẠNH (khoảng 3 – 5°C)	TỦ ĐÔNG (khoảng -16°C)
Sữa mới hút	Có thể giữ trong 6 giờ	Có thể giữ trong 24 giờ (Không lưu trữ trong tủ lạnh vì không đủ mát)	Có thể giữ trong 3 tháng
Sữa đã đông	Sử dụng ngay lập tức	10 giờ	Không làm đông lại

Cho trẻ bú sữa đã hút

- Khi cho bé ăn, đảm bảo bình sữa đã được tiệt trùng trước khi đổ đầy sữa trữ.
- Để rã đông sữa trữ, hãy đặt sữa qua đêm trong ngăn mát để giữ lại các chất dinh dưỡng. Sau khi sữa trữ được rã đông, bạn phải sử dụng trong vòng 24 giờ. Chỉ rã đông sữa trữ bằng cách đặt sữa trong nước ấm trong các trường hợp đặc biệt khẩn cấp.
- Nếu sữa có mùi khó chịu, hãy thải bỏ ngay lập tức.

5. Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Thiết bị không hút được sữa	- Kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận của thiết bị được lắp chính xác. - Kiểm tra xem đầu hút đã được đặt đúng cách trên bầu ngực chưa.
Thiết bị hút nhưng không ra sữa	- Kiểm tra xem ống silicone được lắp đúng chưa - Cường độ hút chưa được đặt ở mức tối thiểu khi thiết bị được bật. - Đảm bảo không có sữa sót lại trong van silicone gây cản trở dòng chảy của sữa.
Hút sữa gây đau	- Cố gắng thư giãn vài phút và thử lại. Khi đã quen với việc sử dụng thiết bị, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn - Giảm cường độ hút bằng nút - - Tham khảo ý kiến bác sĩ
Sữa bị rò rỉ xuống dưới phễu silicone.	- Tháo phễu silicone và lắp lại. Đảm bảo phễu silicone được đặt đúng vị trí và lắp chắc chắn vào đầu hút. - Nghiêng người về phía trước một chút.
Một trong các bộ phận của thiết bị bị biến đổi hoặc hư hỏng.	- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa dạng dung môi hoặc khí để vệ sinh - Trong một số trường hợp, biến đổi nhiệt độ lớn có thể làm hỏng bộ phận nhựa trên thiết bị. - Nếu có bất kỳ bộ phận nào của thiết bị bị hỏng, hãy ngừng sử dụng thiết bị.
Không bật được thiết bị.	- Đảm bảo thiết bị được lắp ráp chính xác và bật lại. - Đảm bảo bộ nguồn được kết nối chính xác với thiết bị

6. Thông số kỹ thuật

Mã thiết bị	BY 60
Nguồn điện	4 pin kiềm AA 1.5 V
Điện thế đầu vào	100-240V (AC~) 50/60Hz
Điện thế đầu ra	6V (DC ---) 1.0 A
Kích thích	168 x 100 x 53 mm
Trọng lượng	310 g (không tính pin)
Áp suất hút tối đa	0.32 bar
Điều kiện vận hành cho phép	+5°C tới +40°C, độ ẩm tương đối 30% tới 85% (không ngưng), áp suất không khí 700 – 1060 hPa
Điều kiện bảo quản cho phép	-20°C tới +60°C, độ ẩm tương đối 10% tới 95% (không ngưng), áp suất không khí 700 – 1060 hPa
Vòng đời ước tính	500 giờ
Sử dụng liên tục	Sau 30 phút BẮT, phải tắt 30 phút

Bộ nguồn

Mã sản phẩm	LXCP12 - 06
Đầu vào	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, tối đa 0.3 A
Đầu ra	6 V DC, 1 A
	Cực kết nối dòng điện xoay chiều
	Cách điện/Bảo vệ loại 2

Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH_ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089 Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline:19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn